

女性に配慮したAEDの使い方

パッドを

素肌に直接貼り付ける


ことができている場合は、**ブラジャーを外す必要はありません。**

服の下で下着をずらして、**右の鎖骨の下と左のわき腹のあたり**に貼ることで対応できます。


金属製品（ブラジャーのワイヤー部分、ネックレス等）は**パッドに触れさせない**ようにしてください。

パッドに触れていなければ、ネックレスは無理に取り外す必要はありません。

AEDのパッドに描かれているイラストをご参照ください。

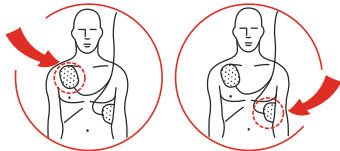

【監修】公益財団法人日本AED財団

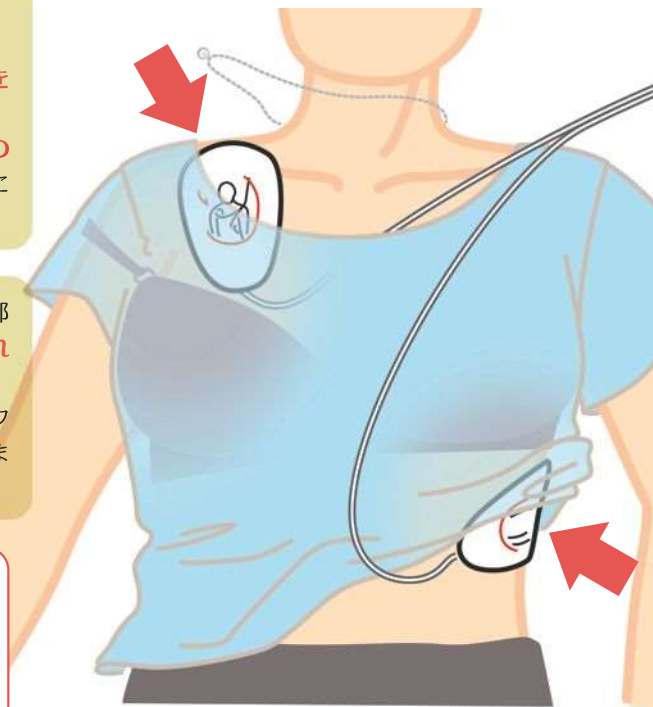

パッドを貼った後に

上から上着やタオルなどをかけても大丈夫です。

その他の注意事項

- * 汗などで胸が濡れている場合は、水分を拭き取ってください。
- * 電極パッドを貼る部分に貼り薬（湿布等）が貼られている場合は、貼り薬を剥がしてください。
- * ペースメーカー等が植え込まれている場合（胸に硬いこぶのようなでっぱりが見える）は、このでっぱりを避けて電極パッドを貼ってください。
- * 車内など、揺れている場所では使用しないでください。

【問合せ先】

〇〇〇市〇〇〇〇課

電話：〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇

【出典】東京都多摩府中保健所